



サージカルマスク Ex Surgical Mask Ex

**フィット性
向上!!**

空気の漏れ率を
改善*

Personal Protective Equipment

※当社従来品との比較

point

① 顔にぴったりフィット

point

② 呼吸しやすい

point

③ 耳が痛くなりにくい

point

④ 肌にやさしい素材



※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。



サラヤ サージカルマスク Exは
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク
クラスII規格に適合しています

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスII 規格適合番号 M22302008 適合番号発行元: JHPIA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 16.0kPa	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 血液バリア: 人工血液バリア性
安全衛生・通気性: 圧力損失、遊離ホルムアルデヒド、蛍光試験

※本体部の性能であり、マスク全体の性能ではありません。

ふつうサイズ 165mm×85mm
50枚入 | ホワイト



当社従来品




サージカルマスクEx

当社従来品(標準サイズ)と比較し、空気の漏れを抑える構造

【サージカルマスク Exのこだわり】

- **不織布素材にこだわり、素肌にやさしい着けごちを実現**
肌荒れの原因とされるマスク素材の摩擦力について、従来品と比べ約 50%に減少。
- **ほおにフィットする形状加工により漏れ率を低減**
当社従来品と『サージカルマスク Ex』着用時の空気の漏れ率をフィットテスター（漏れ率の計測装置）にて測定した結果、当社従来品と比較し約 30%漏れ率を低減。
- **口元ワイヤー&オメガΩ形のプリーツで空間を維持し呼吸のしやすさに配慮**
- **耳が痛くなりにくいソフトな平耳ひもを採用**

「素肌いたわる着けごち」

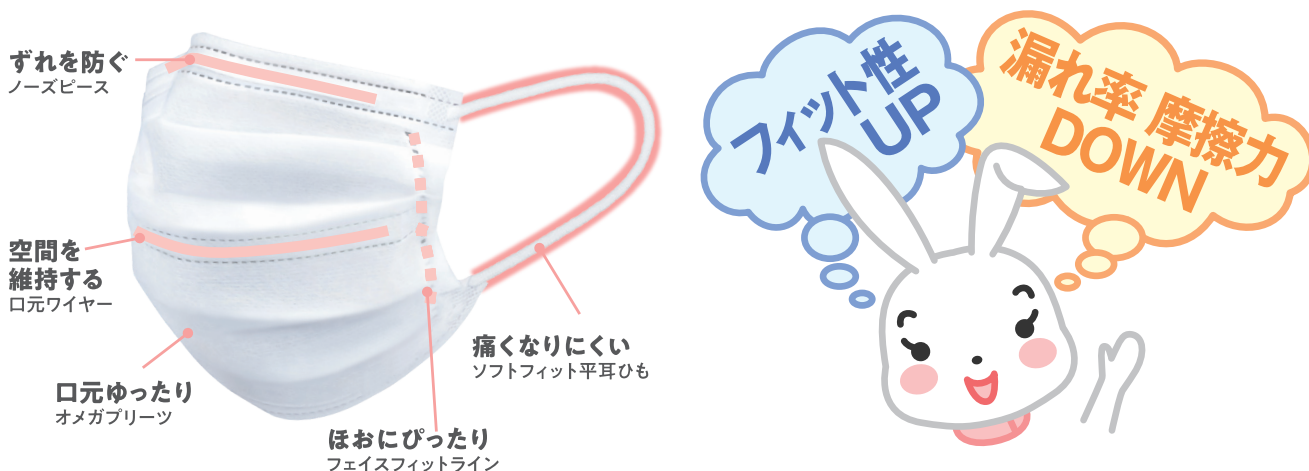

医療用マスクの国内規格「JIS T 9001」とは

2021年に制定・運用開始された、医療用及び一般用のマスクを対象とした公的な規格。その中で、一般医療、介護などに従事する方々が使用するマスクについて“医療用マスク”としての性能要件及び試験方法を規定しています。医療用マスクに必要な捕集機能、人工血液バリア性について、クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つにクラス分類し、また、共通の圧力損失（通気性）、安全・衛生項目を規定しています。

従来医療現場で用いられるマスクの性能評価として、国際規格である「ASTM F2100」への適合性が見られていましたが、「JIS T 9001」が制定されたことにより、日本国内で安心してお使いいただけるマスクの規格基準が運用されることになりました。

『サージカルマスク Ex』は、「JIS T 9001 クラスⅡ」に適合しており、従来の「ASTM F2100」における“Level 2”適合マスクと同等の性能を有しています。

注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、適切に廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サージカルマスク Ex	50枚 / フリーサイズ	20	51055	49-87696-51055-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年5月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)